

Novosti

Sistem MiniMed™ 780G
s senzorjem Simplera Sync™

Spremembe,
ki so na voljo
po posodobitvi
programske
opreme



Posodobitve inzulinske črpalke

Rezervoar in set
Nov rezervoar in set
Samo nov rezervoar
Samo nov set
Polnj. kanile

Meni Rezervoar in set

V meniju Rezervoar in set sta dodani novi možnosti Samo nov rezervoar in Samo nov set.

- Če vam zmanjka inzulina pred priporočeno menjavo seta, lahko za menjavo rezervoarja uporabite možnost Samo nov rezervoar.
- Če je vaš infuzijski set pomotoma odstranjen ali ga je treba namestiti na drugo mesto, izberite možnost Samo nov set, da zamenjate infuzijski set.

Posodabljanje senz.
00:00
Posodabljanje lahko traja
še dodatnih 30 minut.
Spremljajte GK. Vnesene
vrednosti GK ne bodo

Sporočilo o posodabljanju senzorja

Sporočilo o posodabljanju senzorja omogoča vpogled v to, koliko časa lahko traja posodabljanje senzorja. "Posodabljanje senzorja" je način, ki potrjuje zanesljivost senzorja; večina senzorjev bo nadaljevala z normalnim delovanjem brez vašega posredovanja. Če posodabljanje traja več kot 3 ure, zamenjajte senzor, da podaljšate čas delovanja funkcije SmartGuard™.

09:38
Prprava senzorja 1:58 h
Izhod čez 1:51 h
2.0 E
Akt. inzulin

Pasica priprave senzorja

Pri senzorju Simplera Sync™ in senzorju Guardian™ 4 se med pripravo senzorja prikaže odštevalnik. Števec se začne pri 2 urah in odštevata do 0 minut.

Bolus Wizard	09:00
GK 8.3 mmol/L	1.0 E
OH 0g	0.0 E
Prilagoditev	0.0 E
Bolus	1.0 E
Dovajanje bolusa	

Funkcija Bolus omogoča ročni vnos GK*

Manj korakov za vnos vrednosti GK v črpalko. Meritev GK je zdaj mogoče vnesti v funkcijo Bolus Wizard™ in Bolus SmartGuard™.

Opomniki
Skoraj prazen rezer.
Menjava seta
Umerjanje
Prever. GK ob bolusu
Izpušč. bolus ob obroku

Opomnik "Menjava seta"

Ne glede na infuzijski set, ki ga nosite, vas inzulinska črpalka zdaj lahko opomni, kdaj je treba zamenjati infuzijski set. Infuzijski set in rezervoar se standardno zamenjata vsaka 2 do 3 dni.

Infuzijski set in rezervoar Extended™ družbe Medtronic lahko nosite do 7 dni. Opomnik za menjavo seta lahko zdaj spremenite z 2 na 7 dni.



Pojdite v glavni meni

1. Nastavitve
2. Nastavitve opozoril
3. Opomniki
4. Menjava seta

* GK = glukoza v krvi



Senzor Simplera Sync™

- Vse v enem: aplikator, oddajnik in senzor
- Umerjanje ni potrebno¹

1. Pri vstopu v funkcijo SmartGuard™ je potrebna meritev glukoze v krvi (GK). Če se opozorila o glukozi in meritve neprekinjenega merjenja ne ujemajo z vašimi simptomi, za odločanje o zdravljenju sladkorne bolezni uporabite merilnik GK.



Mesta za vstavev senzorja Simplera Sync™

Starost 7-17 let



Glede vstavitve na trebuh pri starostni skupini 7-17 let in več ni bila podana ocena glede točnosti.

Starost 18 let in več



Glede vstavitve na trebuh in vstavitve v zgornji del zadnjice pri starostni skupini 18 let in več ni bila podana ocena glede točnosti.

Vstavev senzorja po korakih

Izberite in očistite mesto vstavitve



Zavrtite pokrovček na aplikatorju in se prepričajte, da je zaščitni trak nedotaknjen



Aplikator položite na pripravljeno mesto in ga močno pritisnite, dokler ne zaslišite klika, nežno dvignite aplikator naravnost stran od telesa



S prstom zgladite lepilni trak


Prekličite seznanitev s trenutnim senzorjem/oddajnikom Guardian™

1. Pojdite v **Glavni meni**
2. Izberite **Seznanjene naprave**
3. Izberite svoj senzor
4. Izberite **Prekliči seznanitev** in potrdite z **Da**


Seznanite svoj novi senzor Simplera Sync™

Ko želite zamenjati senzor Simplera Sync™ z novim, trenutni senzor samodejno prekrine povezavo.

Ni vam treba ročno preklicati njegove seznanitve.

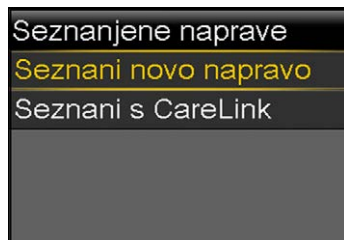


Pojdite v **Glavni meni**
1. Izberite **Seznanjene naprave**
2. Izberite **Seznani novo napravo**

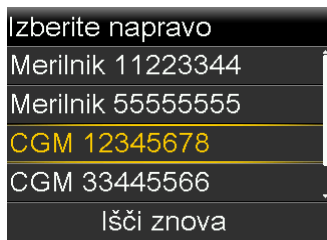

Izberite pripomoček za neprekinjeno merjenje glukoze (CGM), ki se ujema s serijsko številko, navedeno na vrhu aplikatorja



Potrdite **KODO (CODE)**

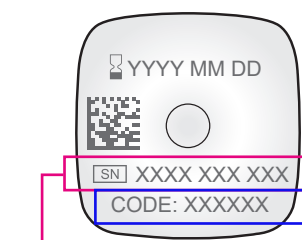

Ser. št.: XXXX-XXX-XXX
CODE (KODA): XXX XXX

Informacije v tem priročniku ne predstavljajo zdravstvenih nasvetov in ne nadomeščajo posveta z zdravnikom. Za indikacije, kontraindikacije, opozorila, previdnostne ukrepe, potencialne neželene učinke in morebitne dodatne informacije se obrnite na svojega zdravnika.

Medtronic

EMEA-IPT-2400081 ©2024 Medtronic. Medtronic, logotip Medtronic in Engineering the extraordinary so blagovne znamke družbe Medtronic. Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke podjetja, ki je v lasti družbe Medtronic.